

AQ Cement Spacer Mold

簡便な手技でなめらかなモールドを形成
滅菌済み医療用シリコン製

販売名 : Aqセメントスペーサーモールド
認証番号 : 302ADBZX00110000
※本品は滅菌済みの単回使用製品で、再使用はできません。

HIP




ヘッド42
サイズ
追加



KNEE

人工関節置換術の術後感染に対する二次的再置換術に効果的です。
スペーサーモールドで形成された抗生剤含有骨セメントを留置することで、
感染の沈静化までの期間に可動域と安定性を確保し、治療中のQOL向上を目指します。

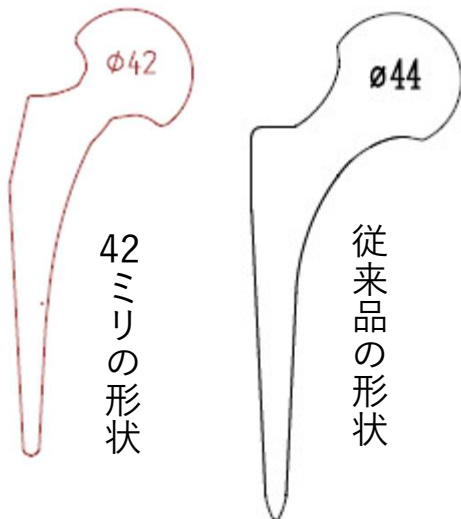

42mm 骨頭径 **新発売**

従来のFit&Fillから

Short wedge taper 型

を採用しました！

*骨頭径 # 42のみのステム形状です

Surgical Procedures

■股関節用サイズ

サイズ	カタログ番号	ヘッド径	ステム長	ステム径	JANコード
42#	A9014-0042	42mm	100mm	6mm	4589731382075
44#	5904-0044	44mm	116mm	7mm	4589731382044
48#	5904-0048	48mm	137mm	9mm	4589731382051
52#	5904-0052	52mm	148mm	11mm	4589731382068

■膝関節用サイズ

サイズ	カタログ番号	大腿骨側 ML/AP	脛骨側 ML	JANコード
S	5901-0002	60/56mm	65mm	4589731382013
M	5901-0003	65/58mm	70mm	4589731382020
L	5901-0004	70/70mm	75mm	4589731382037

一箱 40 g とした場合の必要な箱数：

サイズ	大腿骨側	脛骨側
S	2	1*
M	2	1*
L	2	1

サイズ	必要数
42#	2
44#	2
48#	2**
52#	3

* 大腿骨側の残りのセメントで作成可 ** ノズル内のセメントも使用する

パラコスR ボーンセメント(承認番号23000BZX00172000)または、パラコスR+G ボーンセメント(承認番号:30100BZX00180000)とパラミックス バキュームミキシングシステム及びオプション・細ノズル(届出番号 04B1X10001000007)を使用した場合。他の骨セメント及び混合システムを使用した場合は、体積や残存セメントの量が異なる可能性があります。



「Aqセメントスペーサーモールド手技書」は
こちらのURLより確認ください。